




**Chair and Overbed table  
Fix and tilt section (Split tilt)  
Adjustable in Height and Width (28.5-38.5")  
PRO-TABLE-ADJ**

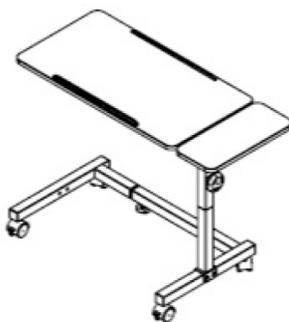

#### Limited Warranty

Pro-Aide Medic products have a limited warranty for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials. In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur. The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as casters, table top and any other parts that are subject to normal wear and need periodic replacement. The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negligence or non-observance of the instruction. If you have a question about your Pro-Aide Medic device or this warranty, please contact an authorized Pro-Aide Medic dealer.

#### Assembly (Please refer to the diagram included with this manual)

*Tools needed: hex wrench*

**WARNING:** Keep empty bags used for packaging out of the reach of children.

Step:

1. Insert the hardware (E, F) into the corresponding holes under the table and tighten them. Install the wheels with brakes (F) at the intersection of the 2 tubing

so that they are easily accessible. Putting them in the wrong place will prevent you from applying the brakes.

2. Position the mast (C) on the base (D). It is here that you decide if you want to have the height adjustment mast to the right or left of the U-shaped base. Once decided, please align the holes of the U-Shaped base and the mast. Insert the hardware (H, I) into the holes. Tighten them to solidify the mast to the base of the table.
3. Insert the tilting table top (A) into the tubing. To slide it, you must press the push button to allow the tubing to slide to the end. Make sure the push button secure the tilting table top after sliding in. This button will prevent the table top to get out of the tubing.
4. Insert the fixed section of the table top (B) into the tubing for this purpose. Insert the E clip into the hole to secure in place the fixed section of the table top. Insert the hardware in order to plug the unused holes of the base.
5. Insert the screw into the hole provided for this purpose under the base. It is here that you decide the width of the base.
6. Adjust the height of the table.

If the table is intended for use in a living room with chair, please measure the width of the chair and make sure to widen the base accordingly. The base does not widen more than 38.5"

**WARNING: Ensure that the table is assembled as described, and that all components are securely attached, before use. Make sure the table top is locked in place before use.**










#### USE

Do not lean on the table, it could tilt. The table supports a distributed weight of 30 lbs. Do not exceed this limit. To raise or lower the table top, unscrew the screw provided for this purpose on the mast and bring the table to the desired position. Then tighten the screw to prevent the platform from going up or down. To tilt the table top, press the handle located above the screw on the mast, tilt the table top and release the handle to the desired position. To lock the casters, press the wheel lock button. To unlock them, pull on it.


#### MAINTENANCE

Check the fit and tightness frequently of all nuts and bolts to ensure that the table is securely assembled. To clean: Gently wipe the table with a soft, clean, damp cloth. Then dry with a soft cloth. **Do not use cleansers that may damage the table' finish.**

Made in Taiwan  
Pro-Aide Medic inc.  
15 Rue Boutet #2  
Quebec, Qc, G2B 2Y6

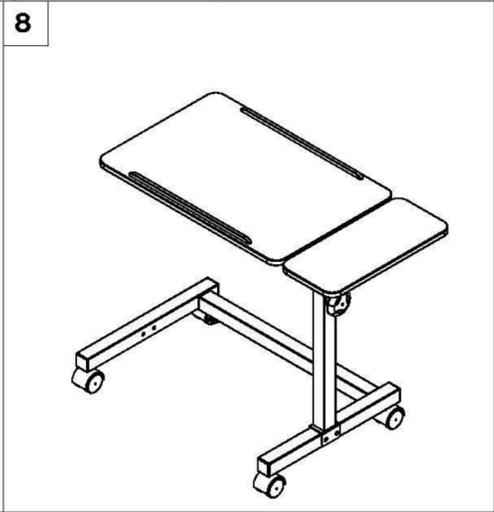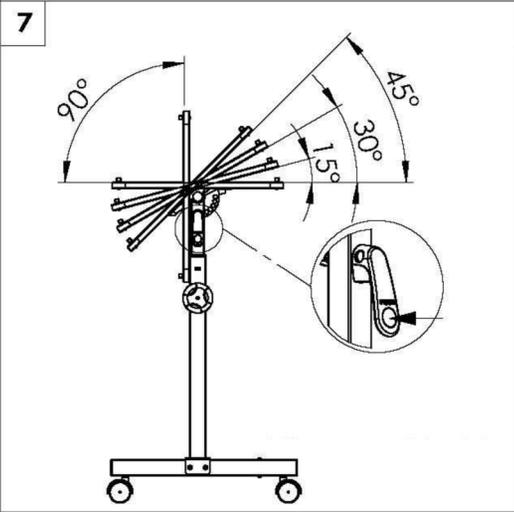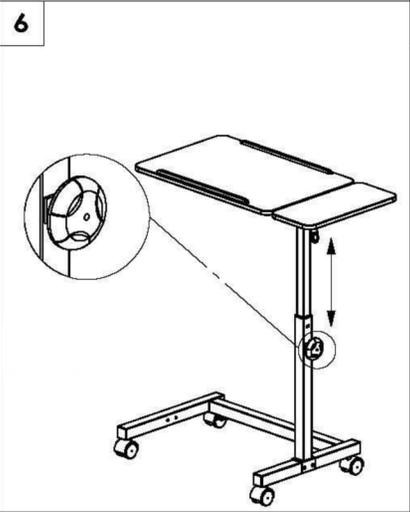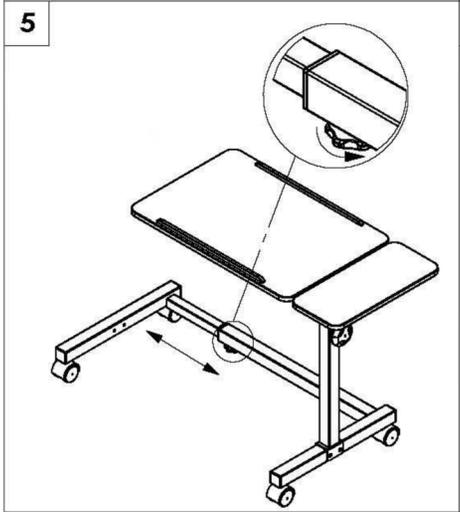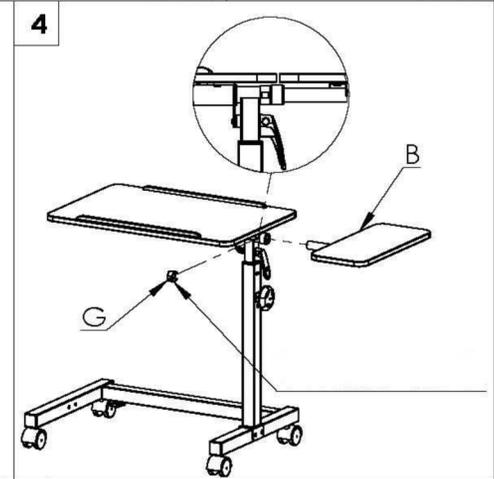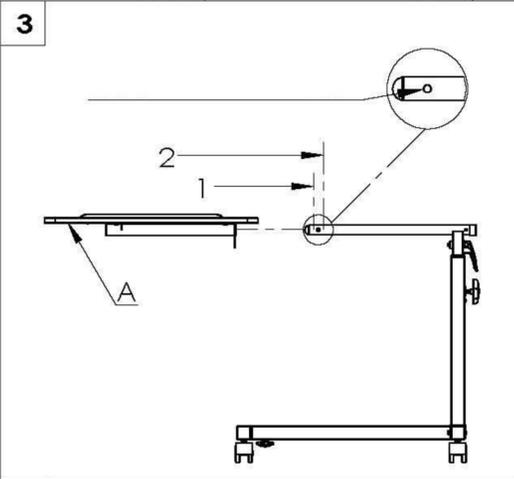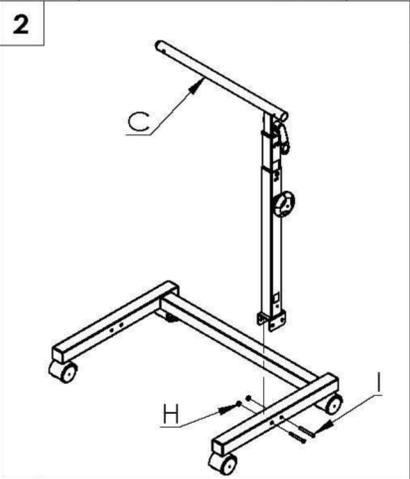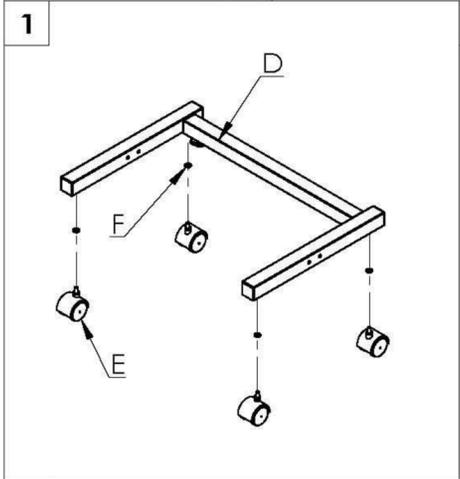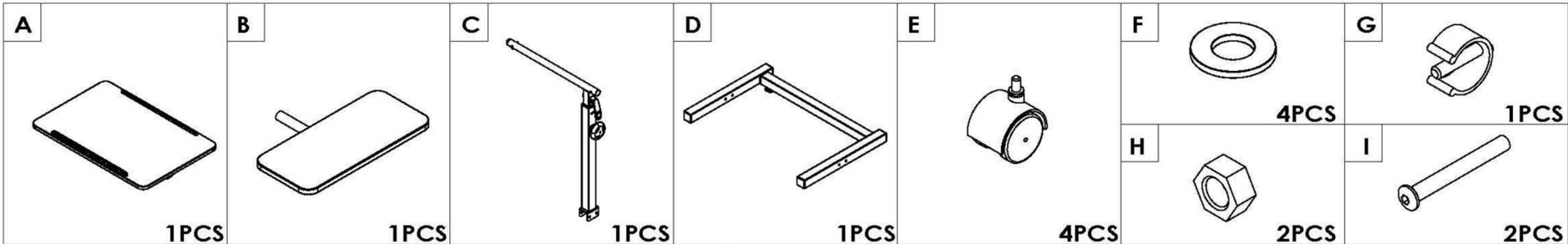

**Table de lit et fauteuil  
Section inclinable et section fixe  
Ajustable en hauteur et en largeur (28.5-38.5")  
PRO-TABLE-ADJ**

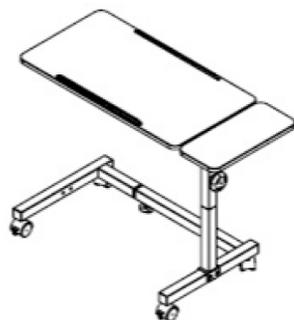

**Garantie Limitée**

Les produits de Pro-Aide Médic comportent une garantie limitée contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour un an à compter de la date d'achat. S'il advenait une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, selon notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez contacter votre fournisseur ou votre détaillant. La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composantes non durables, telles que les roulettes, les plateaux et toutes autres composantes, qui sont soumis à une usure normale et doivent donc être remplacés périodiquement. Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou blessure causés par une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions. Si vous avez des questions concernant votre produit ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant autorisé de Pro-Aide Médic.

**Assemblage (vous référez au diagramme inclus avec ce manuel)**

*Outils nécessaires : clés hexagonales*

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants les sacs vide servant à l'emballage.

**Étape**

1. Installer les roues (E) et les rondelles (F) à l'endroit indiqué afin qu'ils soient accessibles. Les mettre à l'intersection des 2 barres.

2. Positionner le mat (C) sur la base (D). C'est à ce moment que vous décidez si vous voulez avoir le mat d'ajustement de la table en hauteur à la droite ou à la gauche de la base en U. Une fois décidé, veuillez aligner les trous des vis du mat sur ceux de la base.  
Par la suite, Insérer la quincaillerie (H, I et J) dans les trous. Serrez-les afin de solidifier le mat à la base de la table
3. Insérer le plateau inclinable (A) dans la tubulure prévue à cet effet. Pour faire glisser celui-ci, vous devez appuyer sur le bouton presseur afin de permettre à la tubulure de glisser jusqu'au bout. Vous assurez que le bouton presseur ressort par la suite empêchant le plateau de sortir de la tubulure.
4. Insérer le plateau fixe (B) dans la tubulure prévue à cet effet. Par la suite, insérer le clip en E dans le trou de la tubulure afin de sécuriser le plateau fixe.  
Veuillez insérer les bouchons de plastique afin de boucher les trous non utilisés sur la base.
5. Insérer la vis dans le trou prévue à cet effet sous la base. C'est à ce moment que vous décidez de la largeur intérieur de la base.  
Si la table est prévue pour être utilisé avec un fauteuil de salon ou autre, veuillez mesurer la largeur du fauteuil et vous assurer d'élargir la base en conséquence. La base ne s'élargie pas plus que 38.5"
6. Ajuster la hauteur de la table à l'endroit désiré. Faire de même avec l'inclinaison si désiré.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la table est assemblée comme décrit, et que tous les éléments sont sécuritaires avant utilisation. S'assurer que le dessus de la table est verrouillé avant utilisation.

**UTILISATION**

Ne pas vous appuyer sur la table, elle pourrait pencher. La table supporte un poids réparti de 30 lb. Ne pas excéder cette limite. Pour soulever ou descendre le plateau de la table, dévisser la vis prévu à cet effet sur le mat (C) et amener le plateau jusqu'à la position désirée. Ensuite serrer la vis afin d'empêcher le plateau de monter ou descendre. Pour incliner la table, appuyer sur la poignée situé au-dessus de la vis sur le mat, incliner le plateau de la table et relâcher la poignée à la position désirée.  
Pour verrouiller les roulettes, appuyer sur le bouton de verrouillage des roues. Pour les déverrouiller, tirer sur celui-ci.

**Entretien**

Afin de préserver le fini original, nettoyez à l'aide d'un savon doux et rincez à l'eau tiède. Essuyez après chaque utilisation. Vérifiez toujours les fixations pour vous assurer qu'elles ne se

<p>Fabriqué à Taiwan Pro-Aide Medic inc. 15 Rue Boutet #2 Quebec, Qc, G2B 2Y6</p>
---